

Babymate®

耳溫/額溫兩用紅外線體溫計


耳溫測量

- 1 直接把探頭放入耳道內然後按一下按鈕，約一秒後聽到 " 嗶嗶 " 聲便可拿出耳道。體溫會顯示於機身上。
- 2 在此時你可以在機身螢幕中間掃上或下搜尋最近 5 次的體溫記錄。



額溫測量


- 1 把額溫套安裝在體溫計探頭上，將額溫套放在太陽穴的位置，然後按一下按鈕，約一秒後聽到 " 嗶嗶 " 聲便可移開。體溫會顯示於機身上。
- 2 在此時你可以在機身螢幕中間掃上或下搜尋最近 5 次的體溫記錄。

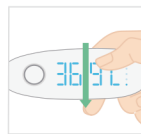

攝氏/華氏轉換

在電池盒內有一個攝氏或華氏轉換鍵，只要左右推動便可切換。

攝氏或華氏轉換鍵

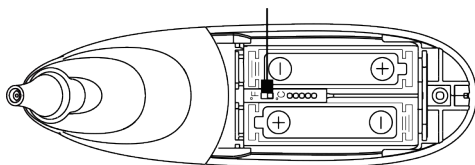

產品技術規格

產品名稱	Babymate 耳溫/額溫兩用紅外線體溫計
型號	BM-045
產品尺寸	4.2cm * 13.5cm * 5.5cm
產品淨重	約103克(含電池)
電池規格	AA 電池 x 2
人體測量範圍	34°C (93.2°F) ~42°C (107.6°F)
操作環境溫度	16.0°C (60.8°F) ~40.0°C (104.0°F)
操作環境濕度	相對濕度 <95%
精確度	±0.1°C (±0.18°F)
LO (低溫)	<34°C (<93.2°F)
HI (高溫)	>42°C (>107.6°F)

LED顯示說明

		當體溫計30秒沒有操作便會自動關機，LED顯示 " OFF "。
		當體溫高於攝氏42度(華氏107.6度)，LED顯示 " HI "。
		當體溫低於攝氏34度(華氏93.2度)，LED顯示 " LO "。
		當測量體溫達到攝氏38度(華氏100.4度)或以上時，會發出 " 嗶嗶嗶-- 嗶嗶嗶 " 警示聲，LED的數字也會變為紅色。
		當電量不足時，體溫計會停止測溫，LED顯示 " " 請更換電池。
		當體溫計出現不正常時，LED會顯示 " Err "。

- 請在16.0°C (60.8°F) ~ 40.0°C (104.0°F) 的環境溫度下使用本體溫計。